

# BRUKSANVISNING HURTIGTEST

## Utstyr


- Testpinne
- Brikke som vist på bilde, ligger oppi hvit emballasje
- Testglass med væske i bunn
- Blank kork til testglass



Video: <https://youtu.be/LDusiOf3Zo0>

Start med å pakk opp utstyret som medfølger i pose og legg ut på benk, ta ut brikke fra emballasje og legg klar. Åpne deretter testpinnen og utfør test.

- 1) Vend pasientens hode litt bakover
- 2) Vri testpinnen mens du fører den inn i neseboret, ca 2 cm inn fra kanten av neseboret
- 3) Roter testpinnen 4 ganger mot neseveggen, utfør dette i begge nesebor.
- 4) Ta testpinnen oppi testglass, klem sammen testglasset i bunnen med pinnen. Og vri pinnen rundt minst 5 ganger.
- 5) Ta ut testpinnen samtidig som du klemmer på sidene av testglasset for å trekke ut væske fra testpinnen.
- 6) Sett godt på blank kork på testglass.
- 7) Forsiktig snu testglass. Hold det slik uten bevegelse i minst 30 sekunder.
- 8) Drypp forsiktig 4 dråper av innholdet i testglass over på dråpepunkt (rundt felt) på brikken.
- 9) Les av resultat etter 15-30 minutter.
- 10) Ved positiv hurtigtest ring smittesporing på 47781641.

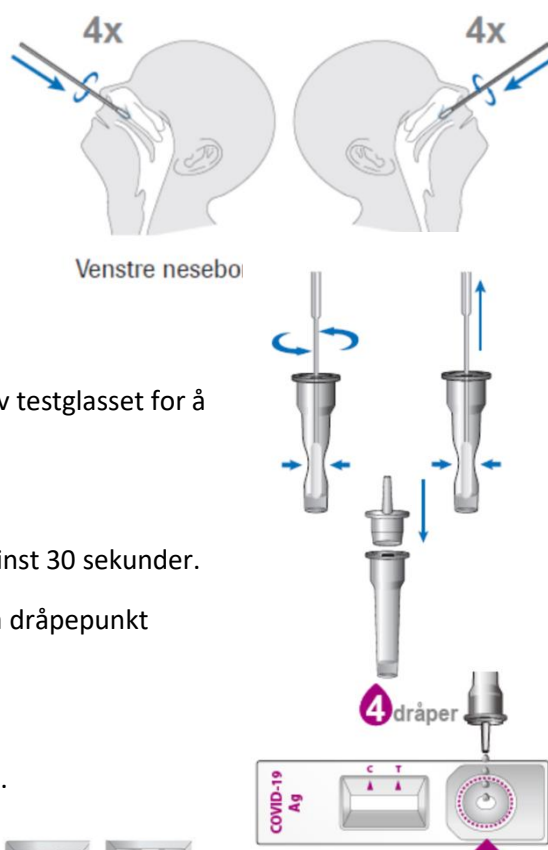

### Positiv test

To fargede linjer vises. En linje i kontrollområdet (C) og en linje i testområdet (T). Enhver fargenyanselse i testområdet skal vurderes som positiv.



### Negativ test

Kun en farget linje i kontrollområdet (C).



### Ugyldig test

Ingen farget linje i kontrollområdet (C). Testen skal i slike tilfeller gjentas med ny prøve og ny testkassett.



## Rapid test instruction:

### Equipment:



- Nasal swab
- Test device
- Tube containing buffer liquid
- Clear cap for tube



Video: <https://youtu.be/LDuslOf3Zo0>

Start by unpacking the equipment included in the bag. Lay it on a clean surface. Remove the test device from its packaging, then the nasal swab and perform the test.

- 1) Slightly tilt the patients head back.
- 2) Roll the nasal swab stick whilst you are entering the nostril, around 2 cm in from the edge of the nostril.
- 3) Rotate the nasal swab 4 times against the inner walls of the nose. Repeat this for both nostrils.
- 4) Remove the film from the test tube containing buffer fluid and place the nasal swab into the tube. Pinch the bottom of the tube and roll the swab at least 5 times.
- 5) Remove the nasal swab whilst pinching the sides of the tube to collect the absorbed liquid from the nasal swab.
- 6) Firmly attach the nozzle cap onto the tube.
- 7) Carefully flip the test tube, so the cap is facing down. Keep it like this for 30 seconds.
- 8) Slowly drip 4 drops of the liquid from the tube into the sample collector on the test device.
- 9) Read the results after 15-30 minutes.
- 10) If the test is positiv: Contact the Stavanger Kommune Covid-19 tracking by calling + 47781641. This number is not an information line and is only to be used in reporting positive test results.

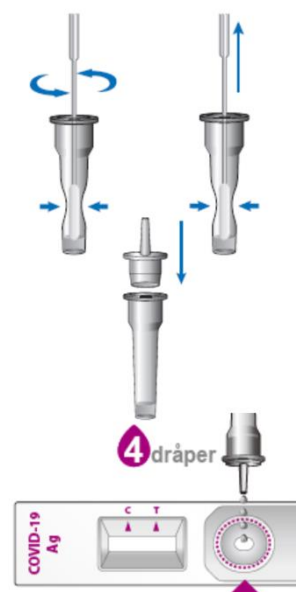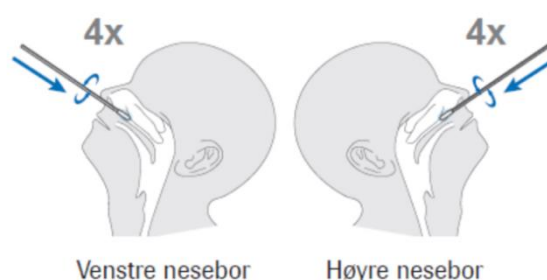

#### Positiv test

To fargede linjer vises. En linje i kontrollområdet (C) og en linje i testområdet (T). Enhver fargenyanse i testområdet skal vurderes som positiv.



#### Negativ test

Kun en farget linje i kontrollområdet (C).



#### Ugyldig test

Ingen farget linje i kontrollområdet (C). Testen skal i slike tilfeller gjentas med ny prøve og ny testkassett.

